

Használati utasítás

Elektromos masszázskészülék SKM 20 A2

A termék használata előtt kérem ismerkedjen meg az összes biztonsági információval! A terméket csak a leírtak szerint használja! A terméket, ha tovább adja kérjük csatolja a használati útmutatót is hozzá!

Rendeltetés szerű használata: A terméket a bőr, kötőszövet és az izomrendszer masszírozására tervezték. Más célra ne használja a terméket! Kizárólag háztartási célra használható. Kereskedelmi, ipari célokra nem.

A nem rendeltetés szerű használatból eredő károokra sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelőséget. Használat előtt ellenőrizze a termék alkatrészeinek állapotát. Ismerkedjen meg a működési elvével. Távolítson el minden csomagoló anyagot.

Jelen használati utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk, a jótállás érvényét veszti. Gyermekek és fogyatékkal élők számára használata nem ajánlott!

Balesetveszély:

Csecsemők és gyermekek elől gondosan zárja el. A csomagoló anyagot nem hagyja gyermeke mellett, mert fulladást okozhat! Mindig tartsa távol a gyermeket a csomagoló anyagoktól és elektromos készülékektől! 8 évesnél idősebb gyermek csak felnőtt felügyelet mellett, masszírozást csak felnőtt által végezve használhatja. CSökkent fizika, érzékszervi, vagy mentális betegségben szenvedők csak segítséggel használhatják!

Tartsa szemelőtt az áramütés veszélyét! Tartsa szárazon a terméket! Ne használja kádban, vagy vizes kézzel. Amennyiben vízbe esik, ne nyúljon utána. Húzza ki a konnektorból, de ne pusztá kézzel. Nedves, vizes tápcsatlakozót soha ne érintsen meg! Soha ne merítse vízbe, vagy egyéb folyadékba, ne takarítsa folyó víz alatt!

Mindig húzza ki a terméket a konnektorból: - ha meghibásodást érzékel, - zivatar és villámlás esetén, - tisztítás előtt! Bármilyen külső sérülést lát a terméken, ne használja! Sérült terméket soha ne használjon! Amennyiben folyadék kerül a termékbe száraz ruhával törölje meg és hagyja kiszáradni!

A termék javítását csak szakember végezheti! A hibás alkatrészeket mindig eredeti alkatrésze kell cserélni! Utángyártott, vagy más fajta alkatrész használata balesetveszélyes lehet!

Használat közben a tápkábelt úgy helyezze el, hogy senki ne essen át rajta!

Soha ne használja a terméket fej masszírozására!

Soha ne használja a terméket állatokon!

Soha ne használja a terméket ha:

- porckorongsérve van
- abnormális elváltozásoktól szenved
- csigolya sérülése van
- pacemakere van!

Amennyiben testi elváltozása, vagy mozgásszervi megbetegedése van konzultáljon orvosával a termék használatát illetően! Soha ne használja a terméket duzzadt, égett, sérült, vagy gyulladt bőrén!

Ne használja a terméket terhesség alatt!

Ne használja a terméket arcon, fejen, szemkörnyéken, vagy a test egyéb érzékeny részein!

Soha ne használja a terméket alvás közben!

Soha ne használja a terméket csökkent tudatállapot alatt pl. : ittas állapot, gyógyszer okozta kábultság.

Soha ne használja a terméket műtétek után!

Ügyeljen rá, hogy a terméket ne érje víz és egyéb nedvesség! Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne sérüljön pl. Ajtó alá, stb. Ne helyezze a terméket forró felületre, vagy nyílt láng közelébe! Ne használjon maró, vagy súroló szert a termék tisztításához!

Ábra ismertető:

1. Elektromos masszírozó
2. LED feszültség jelző
3. M módválasztó gomb
4. + teljesítményszint növelő gomb
5. - teljesítmény csökkentő gomb
6. Ki-bekapcsoló
7. Fogantyú
8. Tápkábel
9. Kiegészítő tasak
10. Masszázs tartozék, 3 pont intenzív- kötőszövet és feszült izmok lazítására D-H ábra
11. Masszázs tartozék, íves- karokra és lábakra, feszült izmok lazítására F-H ábra
12. Masszázs melléklet- kötőszövet és feszült izmok lazítására C-D-E-H ábra
13. Masszázs tartozék- akupresszúrás pontokra a test területén C-től-Hig
14. Masszázs rögzítés- relaxáció masszírozásra
15. Céna Működés: Kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a masszázstartozékot. Az óramutató járásával megegyező irányba húzza be. Ellentétes irányban veszi le.

Masszázs terület ábra szerint:

Váll és nyak C

Hát D

Lábak E

Alkar F

Felkar G

Combok H

Termék ki-bekapcsolása:






Bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a 6-os gombot kb. 2 másodpercig. Hangjelzés hallható a bekapcsolásnál és zöld LED világít. Kikapcsoláshoz nyomja meg újra a 6-os gombot, hangjelzés hallható és a zöld led kialszik. A termék 20 perc után automatikusan kikapcsol. Túlmelegedés védelem miatt. Érdemes a terméket 20 percenként pihentetni.

Masszázmódok: M 3-as gomb 1. Mód: Állandó pulzálás 2. Mód: Másodpercenként 1 pulzálás 3. Mód: Másodpercenként 1-2 pulzálás 4. Mód: Másodpercenként 2-3 pulzálás 5. Mód: 1-4ig módok kombinációja + 4-es gomb intenzitás növelése - 5-ös gömb intenzitás csökkentő Mindig a legalacsonyabb fokozaton kezdje a masszírozást és szükség esetén fokozatosan növelje.

Kellemetlen fájdalom esetén a kezelést hagyja abba.

A termék tisztítása:

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket! A tartozékokat távolítsa el. 10-11-12-13-14-es tartozékokat, nedves ruhával tisztítsa! Szükség esetén néhány csepp mosószer használható a makacs foltok ellen. Tárolás: Használaton kívül tárolja a terméket eredeti csomagolásában. A tartozékok tárolására használja a tasakot. Száraz helyen tartsa a terméket gyermekektől távol

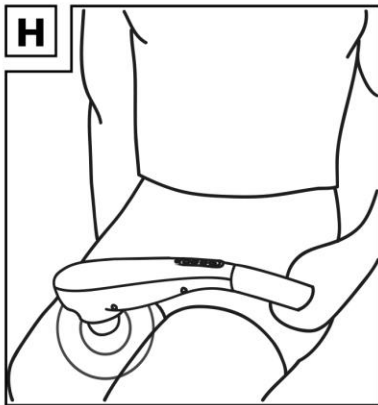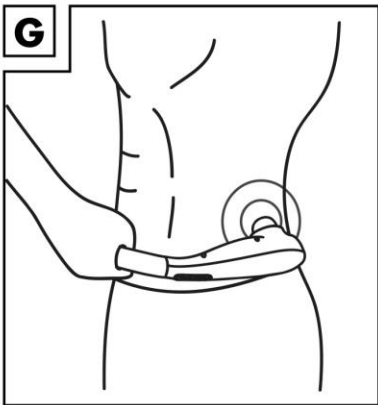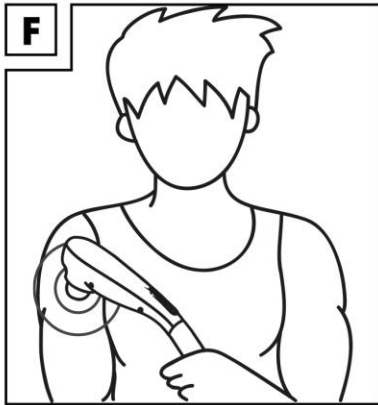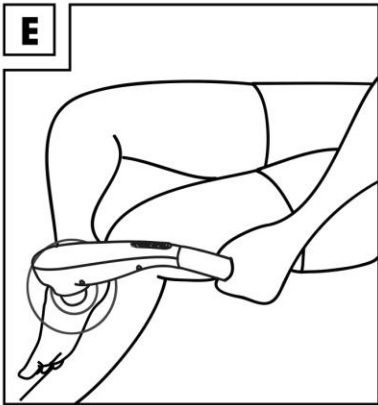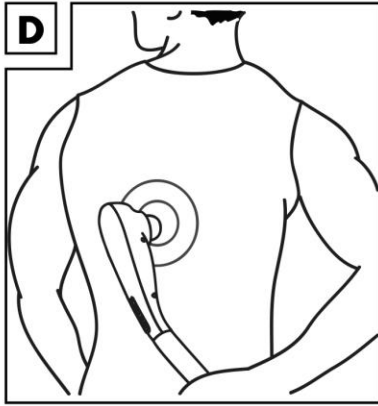

A

