

## Használati útmutató

### Fényterápiás arcmasszírozó tartóval VRAIKO LILY

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.


#### Rendeltetés szerű használata:

Ezt a terméket otthoni szépségápolási céllal fejlesztették ki. A termék fény és rezgés terápia használatával jótékonyan fokozza a bőr vérellátását, ezáltal simítja a ráncokat és javítja a szerkezetét, beleértve a komfortérzetet. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

#### Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

#### Részeinek Áttekintése a mellékelt ábra alapján:

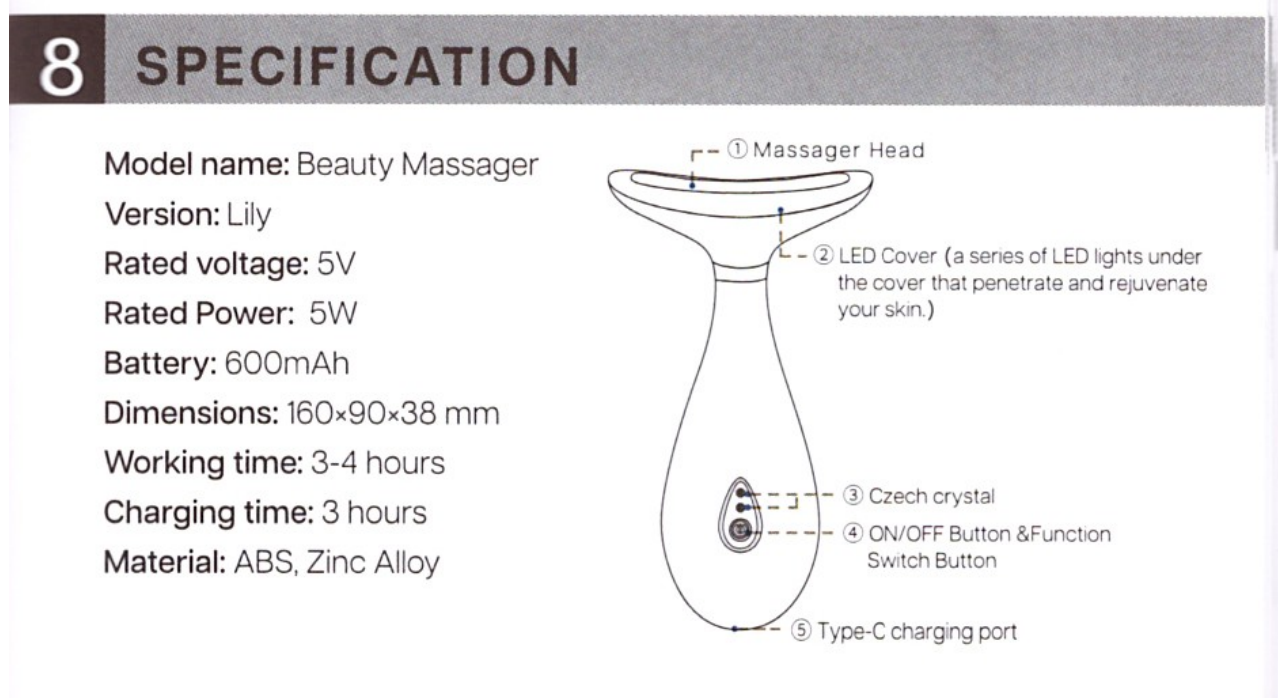

1. **Massázs fej.**
2. **LED borító, ez alatt helyezkednek el a gyógyhatású LED lámpák**
3. **Működés jelző fények**
4. **KI/Bekapcsoló gomb és egyben funkció váltás (hosszan kell nyomni ki és bekapcsoláshoz. Funkció váltáshoz röviden nyomja meg míg a kívánt LED színt eléri)**
5. **Töltő port**

### **Általános figyelmeztetések:**

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügylet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

### **FONTOS! Ügyeljen rá, hogy ne terhelje túl a hálózatot több szerszám egyidejű használatával!**

### **Elektromos biztonság:**

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja! Ne használja a terméket fürdőkád mellett! Soha ne használja a terméket fürdés közben!

### **FUNKCIÓK:**

#### **Kék fény:**

Szobahőmérsékletű fényterápia, mely feszesíti a bőrt és elősegíti a kollagén termelés fokozását. Alkalmas zsíros és problémás bőrre. A pattanásokat okozó baktériumokat károsítja, ezáltal segíthet a pattanásos bőr tisztán tartásán.

#### **Zöld fény:**

42-43C° -os fényterápia. Nyugtató melegítés, mely elősegíti a mikrokeringést, nyugtatja a bőrt, csökkenti az ödémát és a miteszerek kialakulását.

#### **Vörös fény:**

44-45C° -os fényterápia. Magasabb hőmérsékletű kezelés, mely elősegíti a vérkeringést, csökkenti a kialakult ráncokat és a bőr zsírosodását.

Használat előtt mindig tisztítsa meg bőrét és nyakát!

Esetleg használhat szérumokat a nagyobb hatás elérése érdekében.

Nyomja meg hosszan a KI/Bekapcsoló gombot, majd válassza ki az ön számára megfelelő szín funkciót a gomb rövid nyomkodásával.

Végezzen kontrollált lifting masszázst alulról felfelé simító mozdulatokkal a nyakától felfelé, állkapocstól felfelé az arcon a halánték irányába, vagy homlokon középtől halánték felé, orr mellett a szemek alatt kifelé az arcon. A készüléket mozgassa lassan. A kezelést kb. 5 percig érdemes alkalmazni.

Használat után törölje meg száraz puha ronggyal a készüléket és tárolja száraz helyen. Lehetőleg

saját dobozában. Gyerekektől elzártan!

A bőrápolási rutin érdemes naponta 2x elvégezni!